

B.Well

Caring for everyone

Operating Instructions / دستورات عمل‌های راه‌اندازی



WI-912

Oral irrigator

WI-912

آبفشان دهانی

EN

FA



 PRO

 MED

 TECHNO

OPERATING INSTRUCTIONS FOR ORAL IRRIGATOR WI-912

فهرست راهنما

۱. اقدامات احتیاطی و ایمنی 16
۲. موارد استفاده 18
۳. محتویات عرضه‌شده 18
۴. آماده شدن برای کار 20
۵. نصب دستگاه روی دیوار 21
۶. شارژ دستگاه 21
۷. استفاده از دستگاه 22
۸. پس از استفاده 23
۹. مراقبت و تمیز کردن 24
۱۰. مشکلات بالقوه 25
۱۱. دفع باتری و دستگاه 25
۱۲. مشخصات 26
۱۳. شرح نمادهای روی بسته‌بندی و برجسب 27
۱۴. استاندارد مربوطه 27
۱۵. اطلاعات مربوط به ضمانت‌نامه 27

از شما برای خرید آیفشان دهانی WI-912 از B.Well متشکریم. این دستگاه فاصله بین دندان‌ها را به‌طور چشمگیری تمیز می‌کند و جرم دندان‌ها را از بین می‌برد.

این وسیله مانع از ایجاد رسوب روی دندان‌ها می‌شود و به بهترین نحو از پوسیدگی و بیماری‌های پرپودنتال جلوگیری می‌کند. در صورت داشتن پل، ایمپلنت، روکش و براکت ارتودنسی، برای مراقبت از دندان‌های خود از دستگاه کوچک آیفشان دهانی WI-912 استفاده کنید.

از این دستگاه می‌توان برای ماساژ لثه نیز استفاده کرد تا گردش خون بیشتر شود و لثه بهبود یابد. حداکثر کارایی دستگاه با وجود سه حالت کار آن تضمین می‌شود.

۱. اقدامات احتیاطی و ایمنی

هشدار!

هرگز از محلول‌های زیر برای شستشوی دهان استفاده نکنید:

- مواد و محلول‌های حاوی ذرات معلق (جوشانده‌ها، سوسپانسیون‌ها، دمر کرده‌ها و غیره). این ذرات ممکن است باعث انسداد لوله مکش و نازل (سرلوله) شوند.
- محلول‌های حاوی روغن. روغن، حلالی آلی است و استفاده از آن ممکن است روی لوله مکش و قطعات دستگاه، اثر فرسایشی داشته باشد.
- محلول‌های حاوی روغن. روغن، حلالی آلی است و استفاده از آن ممکن است روی لوله مکش و قطعات دستگاه، اثر فرسایشی داشته باشد.
- محلول‌های ضد عفونی‌کننده (پرمنگنات پتاسیم، میرامیستین و سایر داروهای ضد عفونی‌کننده).
- محلول‌های دهانشویه رایج.
- محلول‌های نمکی، خمیر دندان یا مواد شیمیایی.

محلول‌های مجاز برای آیفشان دهانی:

- آب ولرم تمیز (تا دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد). در صورت پایین بودن کیفیت آب شیر منطقه‌تان، از آب فیلتر شده استفاده کنید.
- محلول‌های شستشوی مخصوص آیفشان (باید همیشه در نسبت مشخصی با آب مخلوط شوند. برای آگاهی از نسبت‌های توصیه‌شده به دستورالعمل مربوط به محلول‌های شستشوی شرکت سازنده مراجعه کنید).

احتیاط!

- در صورت استفاده از محلول‌های مخصوص آیفشان، حتماً پس از استفاده از آنها، دستگاه را با آب ولرم شیرین تمیز کنید: مخزن را پر از آب کنید و چرخه شستشو را یکبار دیگر انجام دهید و آب داخل مخزن را از طریق نازل تخلیه کنید. به تاریخ انقضای محلول‌های مجاز، توجه ویژه داشته باشید.
- هرگز از محلول‌های تاریخ‌گذشته استفاده نکنید.

احتیاط!

- باتری‌های این دستگاه، داخل آن تعبیه شده‌اند. از پر تاب دستگاه به درون آتش، گرم کردن، شارژ کردن، استفاده از دستگاه یا ترک آن در مکان‌های با دمای بالا خودداری کنید.
- هرگز از شارژر القایی دارای سیم یا دوشاخه معیوب استفاده نکنید.

اقدامات احتیاطی:

- از قرار دادن یا نگه داشتن شارژر بی‌سیم در جایی که احتمال به زمین خوردن یا افتادن آن در وان حمام، سینک ظرفشویی یا کاسه توالت وجود دارد، خودداری کنید. این کار ممکن است منجر به برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود.
- آیفشان را درون آب فرو نبرید.
- اگر شارژر بی‌سیم آسیب دیده است، یا در صورتی که کابل برق به‌درستی به پریز برق متصل نیست، از این دستگاه استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب برق‌گرفتگی، اتصال کوتاه برق یا آتش‌سوزی شود.
- از پاره کردن، خم کردن، کشیدن یا بیچاندن کابل برق یا اعمال نیروی بیش از حد روی آن خودداری کنید. به‌علاوه، از قرار دادن اشیاء سنگین روی سیم برق خودداری کنید یا سیم را بین چنین اشیاءی قرار ندهید. این کار ممکن است منجر به برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود.

- شارژر بی‌سیم را در آب فرو نبرید یا آن را با آب نشویید. این کار ممکن است موجب برق‌گرفتگی یا اتصال کوتاه برق شود.
- از قرار دادن یا بیرون کشیدن شارژر بی‌سیم از پریز برق یا دستان خسی خودداری کنید. این کار ممکن است موجب برق‌گرفتگی شود.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. رعایت نکردن این امر می‌تواند باعث بروز حوادث و وضعیت‌های خطرناک، مثل بلعیده شدن اتفاقی لوازم جانبی یا قطعات قابل جدا شدن دستگاه توسط کودک شود.
- به‌طور منظم، شارژر بی‌سیم را تمیز کنید تا گرد و غبار در آن جمع نشود. رعایت نکردن این اقدام احتیاطی ممکن است به دلیل خرابی عایق ناشی از رطوبت و انباشت گردوغبار موجب آتش‌سوزی شود.
- همواره بررسی کنید که شارژر بی‌سیم به منبع برقی با ولتاژ اسمی مناسب وصل شده باشد. قصور در انجام این کار ممکن است منجر به برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود.
- از باز کردن قطعات یا تعمیر خودسرانه این ابزار خودداری کنید. این کار ممکن است منجر به آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا آسیب‌دیدگی افراد شود.
- برای انجام تعمیرات (مثل تعویض باتری) با «مرکز خدمات و پشتیبانی B.Well» تماس بگیرید.
- دستگاه را در جایی قرار ندهید که احتمال سقوط و شکستن دستگاه وجود داشته باشد (مثلاً روی سینک ظرفشویی).
- در صورت گرم شدن نازل، از دستگاه استفاده نکنید.

هشدار!

- کودکان و اشخاصی که به‌طور مستقل قادر به استفاده از دستگاه نیستند، همچنین، اشخاصی که حساسیت حفره دهان پایینی دارند، نباید از این دستگاه استفاده کنند. قصور در انجام این کار ممکن است منجر به آسیب‌دیدگی شخص شوند.
- از این دستگاه صرفاً برای تمیز کردن حفره دهان استفاده کنید. گرفتن فواره آب پرفشار به سمت چشم، بینی، گوش یا گلو ممکن است منجر به آسیب‌دیدگی افرادی شود. قبل از استفاده از این دستگاه برای درمان حفره دهان یا توسط افرادی با بیماری‌های پرودنتال شدید، با دندانپزشک مشورت کنید.
- افرادی که از درد دندان یا لثه رنج می‌برند، نمی‌توانند در برخی موارد از آیفشان استفاده کنند. با دندانپزشک مشورت کنید.
- در حین استفاده، نازل را محکم به روی دندان‌ها یا لثه فشار ندهید، زیرا ممکن است موجب آسیب‌دیدگی شود.
- هرگز در مخزن، آب یا دمای بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد نریزید.
- هنگام قطع اتصال شارژر بی‌سیم از پریز برق، از گرفتن سیم خودداری کنید و همواره دوشاخه برق را بگیرید. قصور در انجام این کار ممکن است موجب برق‌گرفتگی، اتصال کوتاه برق یا آتش‌سوزی شود.
- دستگاه را تمیز نگه دارید و برای شستشوی دهان فقط از آب شیرین و ولرم شیر استفاده کنید.
- برخی از انواع مایعات ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. بنابراین، هرگز از مایعات ذکرشده در فهرست ممنوعه برای آیفشان استفاده نکنید.
- پس از استفاده از دستگاه، حتماً آب باقی‌مانده در مخزن آب را بیرون بریزید و به‌مدت ۲ الی ۳ ثانیه دستگاه را روشن کنید تا به‌طور کامل تخلیه شود. در صورت رعایت نکردن استانداردهای بهداشتی استفاده از این دستگاهی، ممکن است کافچ و باکتری در آن رشد کنند، که می‌توانند برای سلامتی مضر باشند. همچنین، این کار ممکن است منجر به بوی ناخوشایند و خراب شدن آن شود.
- این دستگاه برای استفاده اشخاص (شامل کودکان) دارای توانایی‌های محدود جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد فاقد دانش و تجربه مربوطه طراحی نشده

لوازم جانبی برای آیفشان B.Well مدل WI-912 (جداگانه فروخته می‌شود):
مجموعه وسایل جانبی:

وسایل جانبی برای آیفشان WI-912 استاندارد

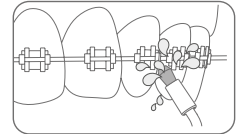


به منظور پاک کردن فضا بین دندان‌ها از باکتری و ذرات غذا طراحی شده است. دوره مصرف پیشنهادی قبل از تعویض - ۶ ماه.

مهم!


برای رعایت بهداشت فردی، هر یک از اعضای خانواده باید از وسیله جانبی خودشان استفاده کند.
به همین منظور، وسایل جانبی با رنگ‌های مختلفی نشانه‌گذاری می‌شوند.

وسایل جانبی برای آیفشان WI-912 ارتودنسی



ایده‌آل برای پاک کردن پل، سیم ارتودنسی و روکش.
به‌طور مؤثری همه اجزای ساختارهای دست‌ساز را تمیز می‌کند.
دوره مصرف پیشنهادی قبل از تعویض - ۶ ماه.

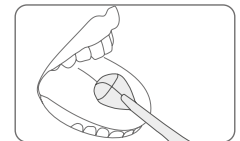وسایل جانبی برای آیفشان WI-912 تمیز کردن زبان



مناسب برای تمیز کردن روزانه زبان.
جرم باکتریایی دندان را از بین می‌برد و نفس را تازه می‌کند.
دوره مصرف پیشنهادی قبل از تعویض - ۶ ماه.

است. استفاده از این دستگاه توسط چنین افرادی فقط در صورتی مجاز است که تحت نظارت شخص (اشخاص) مسئول ایمنی آنها و منوط به ارائه دستورالعمل‌های واضح نحوه استفاده از آن باشد. باید احتیاط شود که کودکان با این دستگاه بازی نکنند.

۲. موارد استفاده

آیفشان دهانی WI-912 با لوازم جانبی آن، برای موارد زیر طراحی شده است:

- بهداشت و مراقبت‌های کامل از حفره دهان و فضای بین دندان‌ها;
- مراقبت از حفره دهان افرادی که از پل، ایمپلنت، روکش و سیم ارتودنسی استفاده می‌کنند.
- تمیز کردن و ماساژ لثه‌ها.

این دستگاه برای استفاده شخصی طراحی شده است.

موارد منع استفاده:

پیش از استفاده از آیفشان، توصیه می‌شود در صورت اقدام به جراحی در حفره دهان و در مرحله تشدید بیماری‌های مزمن حفره دهان، با دندانپزشک مشورت کنید. در طول چند استفاده اول از آیفشان، ممکن است خونریزی کمی در لثه‌ها وجود داشته باشد.
در صورت سالم بودن لثه‌ها، هرگونه خونریزی در لثه‌ها باید ظرف مدت ۱ الی ۲ هفته متوقف شود.
اگر پس از گذشت ۳ هفته از استفاده از دستگاه، با خونریزی لثه مواجه شدید، استفاده از آیفشان را متوقف و با دندانپزشک مشورت کنید.

۳. محتویات عرضه‌شده

آیفشان دهانی WI-912

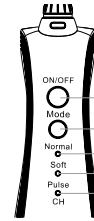
محتویات تحویلی:

۱. آیفشان دهانی
۲. عدد نازل استاندارد
۳. وسیله جانبی ارتودنسی - ۱ عدد
۴. وسیله جانبی تمیز کردن زبان - ۱ عدد
۵. وسیله جانبی پرودنتال (برای لثه‌ها) - ۱ عدد
۶. مخزن آب ۰.۵۱ میلی‌لیتر
۷. فیلتر - ۱ عدد
۸. لوله مکش - ۱ عدد
۹. مجموعه پیچ و اتصالات دیوار برای نصب روی دیوار
۱۰. کیف نگهدارنده - ۱ عدد
۱۱. شارژر بی‌سیم - ۱ عدد
۱۲. کتابچه راهنمای کاربری - ۱ عدد
۱۳. کارت ضمانت‌نامه - ۱ عدد
۱۴. جعبه - ۱ عدد

توجه: در زمان خرید، ممکن است داخل مخزن آب یا لوله مکش، رطوبت وجود داشته باشد. این رطوبت از آب مقطر مورد استفاده برای آزمایش محصول باقی مانده است و برای انسان خطری ندارد.

حالت و نشانگر آن

1. **کلید تغییر حالت (فشار دادن آن)** تنظیمات فواره آب و چراغ نشانگر حالت مربوطه را تغییر می‌دهد.
 2. **معمولی** - تمیز کردن مؤثر دهان.
 3. **ملايم** - تمیز کردن آرام و دقیق دندان‌ها و لثه‌های حساس.
 4. **ضربان‌دار** - تمیز کردن و ماساژ دادن لثه.
- توجه:** در صورت استفاده از دستگاه برای اولین بار، دکمه روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید و سپس هر یک از حالت‌های فواره آب را با مخزن پر از آب آزمایش کنید.





کارکردهای کنترلر


- دکمه روشن/خاموش
- کلید تغییر حالت
- معمولی
- ملايم
- ضربان‌دار / نشانگر شارژ CH

وسيله جانبی برای آیفشان WI-912 پرودنتال

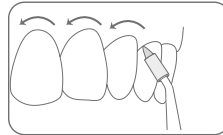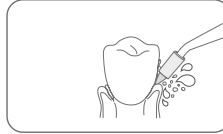برای تمیز کردن حاشیه لثه و جیب‌های لثه‌ای، همچنین، برای تمیز کردن سطح دندان مصنوعی زیر پروتز و پل‌های دندان طراحی شده است. دوره مصرف پیشنهادی قبل از تعویض - ۶ ماه.



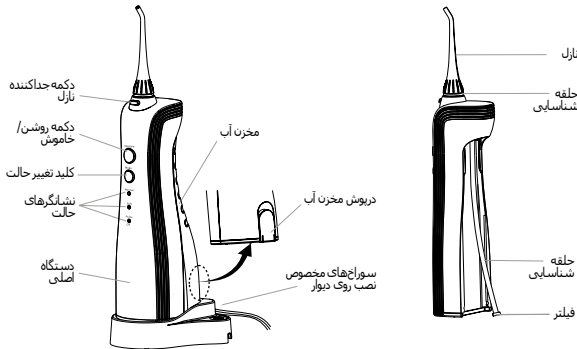۴. آماده شدن برای کار



برای روشن/خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید. برای انتخاب حالت موردنظر برای فواره آب (معمولی، ملايم، ضربان‌دار)، دکمه تغییر حالت را فشار دهید. حالت انتخاب‌شده توسط نشانگر حالت نشان داده می‌شود. چنانچه خواستید از حالت دیگری استفاده کنید، کلید تغییر حالت را فشار دهید تا دستگاه به تنظیمات موردنظر تغییر یابد. با فشار دادن کلید تغییر حالت، حالت فواره آب از معمولی به ملايم و ضربان‌دار تغییر می‌کند.

۵. نصب دستگاه روی دیوار

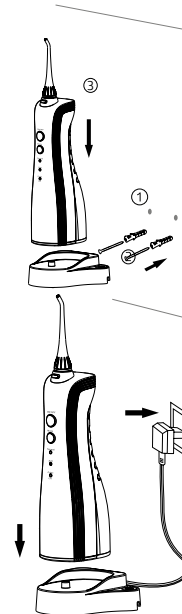
- در صورت لزوم، می‌توان آیفشان را روی دیوار نصب کرد. مجموعه پیچ و اتصالات به همراه محصول ارائه می‌شود. سوراخ‌های مخصوص نصب در قسمت پشت شارژر قرار دارند.
1. فاصله بین سوراخ‌ها را اندازه بگیرید و پیچ و اتصالات را روی نقاط مشخص‌شده روی دیوار ببندید.
 2. شارژر را روی پیچ بسته‌شده روی دیوار قرار دهید.
 3. به‌علاوه، بررسی کنید که پایه محکم باشد.

۶. شارژر دستگاه

1. شارژر بی‌سیم را به برق وصل کنید.
2. آیفشان را روی شارژر بی‌سیم قرار دهید.
3. نشانگر "CH" در حین شارژ آیفشان چشمک می‌زند، وقتی شارژر دستگاه پر می‌شود، نور نشانگر "CH" ثابت می‌شود.
4. وقتی شارژر کامل شد، شارژر بی‌سیم را از برق بکشید.


توجه:

اگر حین روند و پس از آن، نشانگر CH پیوسته چشمک می‌زند، به این معنی است که باتری آیفشان باید شارژ شود. شارژر باتری تقریباً پس از ۸ ساعت کامل می‌شود. شارژر کامل باتری حدوداً ۲۴ ساعت طول می‌کشد.





۷. استفاده از دستگاه

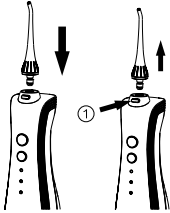۱. نازل را به بخش فرورفته مربوطه روی دستگاه اصلی متصل کنید. برای جدا کردن نازل، دکمه جداکننده نازل را فشار دهید و نازل را به سمت بالا بکشید.
۲. از طریق هر یک از روش‌های پیشنهادی زیر، مخزن را با آب پر کنید:



②

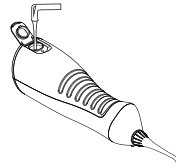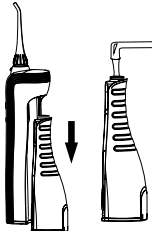①




در حالی که دستگاه اصلی را عمودی نگه داشته‌اید، مخزن آب را جدا کنید. مخزن را با آب دارای دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد یا کمتر پر کنید. و مخزن را مجدداً در داخل دستگاه قرار دهید.

دربوش مخزن آب را باز کنید. دستگاه اصلی را طوری نگه دارید که تراز باشد. سپس مخزن را با آب دارای دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد یا کمتر پر کنید. دربوش را ببندید و مطمئن شوید که محکم قفل شده است.

⚠ احتیاط! هرگز بدون نازل، از آبفشان استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.

۱. همیشه فقط از آب شیرین شیر استفاده کنید.
 ۲. هرگز محلول‌های ذکرشده در فهرست ممنوعه موجود در ابتدای دستورالعمل، بخش ۱، اقدامات احتیاطی را داخل مخزن نریزید.
 ۳. برای حصول اطمینان از کارکرد بدون مشکل، مطمئن شوید که هنگام پر کردن مخزن با آب، آبفشان خاموش است.
 ۴. دستگاه را بدون آب به کار نیندازید، به جز هنگامی که آب باقی‌مانده را پس از استفاده از دستگاه خالی می‌کنید. استفاده از دستگاه بدون آب ممکن است باعث خرابی دستگاه شود.
 ۵. قبل از روشن کردن دستگاه، وسیله جانبی آبفشان را در حفره دهان قرار دهید. روی سینک بایستید، خم شوید و دستگاه را به‌صورت کاملاً عمودی نگه دارید و وسیله جانبی را به سمت دندان‌ها و لثه‌ها بگیرید. مادامی که وسیله جانبی را داخل دهانتان قرار می‌دهید، دکمه روشن/خاموش را فشار ندهید. کار با دستگاه را از پشت فک شروع کنید و در فضای بین دندان‌ها متوقف کنید تا ضدعفونی بهتری انجام شود.
- آن‌قدر ادامه دهید تا تمام قسمت‌های اطراف و بین دندان‌ها تمیز شوند. اگر دستگاه را وارونه کنید، مکش آب از مخزن متوقف می‌شود. برای جلوگیری از پاشیدن آب، حین آبفشانی کردن دهانتان را اندکی بپوشانید.

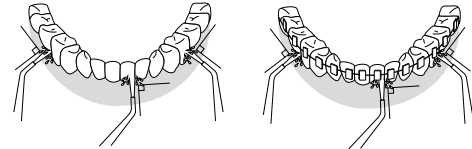
۶. دستگاه در حالت انتخاب‌شده قبلی شروع به کار می‌کند. برای تغییر حالت کار، انتخاب‌کننده حالت را فشار دهید. بسته به حالت کار انتخاب‌شده، زمان کار دستگاه با مخزن آب کاملاً پر، از ۳۰ تا ۱۰۰ ثانیه متغیر است.
۷. دهانتان را کمی باز نگه دارید تا امکان خروج آب وجود داشته باشد. فواره آب را تا حد امکان به‌صورت عمودی به سمت فضای بین دندان‌ها یا محل اتصال دندان و لثه بگیرید. دستگاه را به‌آرامی در امتداد قوس دندان حرکت دهید. در فضای بین دندان‌ها یا ناحیه اطراف سیم ارتودنسی، این مراحل باید با دقت ویژه‌ای انجام شود. برای رسیدن به بهترین نتایج، از ناحیه دندان آسیاب (دندان‌های خلفی) شروع کنید و دستگاه را به‌آرامی به طرف دندان‌های جلو حرکت دهید. دستگاه را در امتداد لثه‌ها حرکت دهید و در فضای بین دندان‌ها مکث کنید. آن‌قدر ادامه دهید تا تمام قسمت‌های اطراف و بین دندان‌ها کاملاً تمیز شوند. اما فراموش نکنید که آبفشانی دهان جایگزینی برای مسواک زدن به دندان‌هایتان نیست. دندان‌ها یا دندان‌های مصنوعی خود را حداقل پنج دقیقه پس از صرف غذا مسواک بزنید، سپس از این دستگاه استفاده کنید.



۸. پس از استفاده، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا آبفشان خاموش شود، سپس آن را از حفره دهان خارج کنید.
۹. برای راحتی استفاده، می‌توانید وسیله جانبی را ۳۶۰ درجه حول محور آن بچرخانید.

۸. پس از استفاده

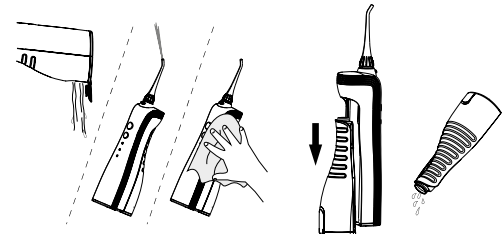۱. بدون جدا کردن نازل از آبفشان، دربوش مخزن آب را باز کنید یا مخزن را جدا کنید و آب آن را تخلیه کنید.
۲. دستگاه را به‌مدت چند ثانیه روشن کنید تا آب باقی‌مانده تخلیه شود.
۳. آبفشان را با پارچه خشکی پاک کنید.



- لوله مکش را با آب بشوید و با پارچه نرمی خشک کنید.
- لوله را خم نکنید، نکشید یا بپیچانید.

۱۰. مشکلات بالقوه

مشکل	علت	راه حل
آبفشان کار نمی‌کند	دستگاه را تازه خریداری کرده‌اید یا به مدت بیش از ۳ ماه از آن استفاده نکرده‌اید	باتری را به مدت 24 ساعت شارژ کنید
حتی پس از شارژ، فقط می‌توان برای چند دقیقه از آبفشان استفاده کرد	چرخه کار باتری در حال اتمام است	لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید
	باتری به اندازه کافی شارژ نمی‌شود	باتری را به مدت 24 ساعت شارژ کنید
	نازل مسدود شده است	نازل را تعویض کنید
	نازل کج شده است	نازل را تعویض کنید
فشار آب کم است	فیلتر مسدود شده است	فیلتر را تمیز کنید
	باتری به اندازه کافی شارژ نمی‌شود	باتری را به مدت 24 ساعت شارژ کنید
	مخزن آب خالی است	درون مخزن، آب بریزید
آب از نازل خارج نمی‌شود	طرز قرار گرفتن دستگاه نادرست است	هنگام استفاده از دستگاه اصلی، آن را صاف نگه دارید

۱۱. دفع باتری و دستگاه

بعد از اتمام عمر دستگاه و قبل از دفع آن، حتماً باتری‌ها را خارج کنید. هنگام خارج کردن باتری، حفاظت از چشم و دست را فراموش نکنید. باتری را به صورت جداگانه از دستگاه برقی اصلی دفع کنید. در صورت داشتن سؤال درباره خارج کردن باتری از دستگاه برقی، لطفاً با مرکز تماس یا مرکز خدمات تماس بگیرید.

حفاظت از محیط زیست و بازیافت:

درون این دستگاه از باتری‌های لیتیموم یون استفاده شده است. در صورت وجود مکان دفع مخصوص در کشورتان، لطفاً باتری را حتماً در آن محل دفع کنید. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری‌ها را باز یا تعویض نکنید. برای تعویض آنها، فقط به مراکز خدمات مجاز مراجعه کنید. این دستگاه باید مطابق با استانداردهای مربوطه دفع شود و نباید به‌عنوان

توجه:

- همیشه آب باقی‌مانده را تخلیه کنید. این کار از ایجاد آلودگی و رشد باکتری‌ها در آب باقی‌مانده در دستگاه جلوگیری می‌کند.
- اگر قصد ندارید برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده کنید، فراموش نکنید که دستگاه را قبل از قرار دادن در جای خود، تمیز و خشک کنید.

۹. مراقبت و تمیز کردن

تمیز کردن

- دستگاه را خاموش کنید، مخزن آب و نازل را جدا کنید. هنگام شستشو، هرگز از آب با دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد استفاده نکنید.
- برای تمیز کردن دستگاه، فقط از آب یا مواد شوینده دارای PH خنثی استفاده کنید. هرگز برای تمیز کردن دستگاه از سود سوزآور یا ساینده‌ها استفاده نکنید، زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند.

دستگاه اصلی

- برای تمیز کردن دستگاه اصلی، از دستمال پارچه‌ای استفاده کنید. برای از بین بردن کثیفی‌هایی که دسترسی به آنها دشوار است، از صابون مایع یا آب استفاده کنید. فقط از مواد شوینده دارای PH خنثی استفاده کنید.
- هرگز از سود سوزآور و مواد ساینده (مانند سرکه یا حلال‌های رسوب‌آهک) استفاده نکنید، زیرا می‌توانند به دستگاه آسیب برسانند.
- هرگز دستگاه اصلی را داخل آب فرو نبرید.
- پس از شستشو، دستگاه اصلی را با دستمال پارچه‌ای خشک کنید.
- اگر آبفشان با هر محلولی استفاده شود، همواره باید پس از هر بار استفاده، با آب شسته شود. برای این منظور، مخزن آب را با آب گرم پر کنید و دستگاه را روشن کنید، وسیله جانبی آبفشان را به سمت سینک ظرفشویی بگیرید، سپس دستگاه را خشک کنید.

مخزن آب

- مخزن را با آب بشوید.
- پس از تمیز کردن، آب مخزن را تخلیه کنید.
- اگر قصد ندارید از دستگاه به مدت یک هفته یا بیشتر استفاده کنید، داخل و خارج مخزن را خشک کنید.
- برای تمیز کردن، فقط از مواد شوینده ملایم دارای PH خنثی استفاده کنید.

نازل

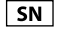

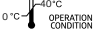
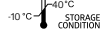

- پس از هر بار استفاده از وسایل جانبی، آنها را با آب بشوید. توصیه می‌شود به‌منظور ضدعفونی کردن وسایل جانبی، آنها را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه در هر یک از محلول‌های زیر قرار دهید: حلال الکلی، محلول آب اکسیژنه ۳٪، محلول کلرهگزیدین ۱٪. توصیه می‌شود پس از ضدعفونی کردن وسایل جانبی در محلول، آنها را با آب گرم بشوید. تمیز کردن و ضدعفونی کردن بدون نیاز به تماس، شامل پاک‌کننده‌های فراضوی یا فرابنفش، مجاز است.
- دوره مصرف پیشنهادی قبل از تعویض - ۶ ماه.

لوله مکش

از دستگاه در برابر سقوط و ضربه محافظت کنید. دستگاه را از دماهای بالا دور نگه دارید و در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

۱۲. شرح نمادهای روی بسته‌بندی و برجسب

				
قبل از استفاده، دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.	دفع به‌منظر جمع‌آوری جداگانه	شماره سری ساخت	کلاس الکتریکی دو	نشان CE (مورد قبول اروپا)

				
شماره محصول	شماره سریال	شرایط عملیاتی، دما ۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد	شرایط نگهداری، دما ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد	نام شرکت سازنده

تاریخ تولید دستگاه روی برجسب آن در شماره سریال (SN) به‌صورت رمز نوشته شده است؛ دو رقم اول نشان‌دهنده هفته تولید، دو رقم دوم نشان‌دهنده سال تولید.

۱۲. استاندارد مربوطه

- نمونه ارائه‌شده از دستگاه فوق برای مطابقت با نشان CE، دستورالعمل اتحادیه اروپا و استانداردهای زیر مورد آزمایش قرار گرفته است:
- دستورالعمل ولتاژ پایین 2014/35/EU
 - دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU.

۱۵. اطلاعات مربوط به ضمانت‌نامه

مدت زمان ضمانت دستگاه ۲ سال پس از تاریخ خرید و مدت زمان ضمانت نازل‌های استاندارد ۶ ماه پس از تاریخ خرید است. این ضمانت‌نامه هیچ‌گونه خسارت ناشی از استفاده ناصحیح را شامل نمی‌شود. چنانچه در طول مدت اعتبار ضمانت‌نامه، عیبی در ساخت دستگاه مشاهده شد، قطعه معیوب تعمیر می‌شود یا اگر تعمیر دستگاه غیرممکن باشد، با دستگاهی دیگر تعویض خواهد شد. ضمانت‌نامه این موارد را شامل نمی‌شود: اجزاء، وسایل مصرفی مستعد فرسودگی، باتری‌ها، کیسه‌ها، بسته‌بندی.

زباله خانگی دور انداخته شود.

۱۲. مشخصات

زمان شارژ باتری:	≈ ۲۴ ساعت
عمر عملیاتی باتری:	حداکثر تا ۵۰۰ چرخه (شارژ/تخلیه)
نوع باتری:	لیتیوم یون DC 3,7V
مدت زمان کار در هر شارژ:	≈ ۶۰ دقیقه
شارژر بی‌سیم:	۱۰۰۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز
مصرف توان:	۰.۷ - ۱.۷ وات
ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع)	۵۶ × ۷۹ × ۱۹۵ میلی‌متر
شارژر (آداپتور)	شارژر القایی (بدون آداپتور)
وزن دستگاه:	شارژر بی‌سیم - ۱۷۶ گرم دستگاه اصلی - ۲۸۲ گرم
ظرفیت مخزن آب:	۱۵۰ میلی‌لیتر
مدت زمان کار با مخزن پر:	حالت کار «معمولی» - ۲۰ الی ۶۰ ثانیه حالت کار «ملايم» - ۸۵ ثانیه حالت کار «ضربان‌دار» - ۱۰۰ ثانیه
سرعت ضربان فواره آب:	۱۴۲۰ ضربان در دقیقه
فشار کمینه/بیشینه فواره آب:	۲۷۸ الی ۷۲۰ کیلوپاسکال
خاموش شدن خودکار:	پس از ۲ دقیقه کار کردن
شرایط نگهداری:	دما: ۱۰۰ درجه الی ۴۰+ درجه، رطوبت نسبی ۸۵٪ یا کمتر.
شرایط کاری:	دما: ۰ درجه الی ۴۰+ درجه، رطوبت نسبی ۸۵٪ یا کمتر.



B.Well Swiss AG

Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

www.bwell-swiss.ch

رازان طب آپادانا

نماینده رسمی و انحصاری محصولات

در ایران B.Well Swiss AG