

B.WELL
SWISS
CONTROLLED

B.Well 
caring for everyone

دستورالعمل های عملیاتی

PRO-850

مسواک برقی Sonic مدل

FA



PRO

مسواک برقی Sonic مدل PRO-850

لطفا پیش از استفاده از این دستگاه، این راهنما را به دقت بخوانید و برای مراجعه در آینده آن را نگه دارید.



۱. دستورالعمل های ایمنی 3
۲. موارد استفاده 3
۳. موارد عرضه شده 4
۴. دستورالعمل های کاربری 4
۵. مشخصات فنی 6
۶. رفع مشکلات 6
۷. استاندارد کاربردی 6
۸. اطلاعات گارانتی 7
۹. شرح نمادهای روی بسته بندی و برچسب 7

از شما برای خرید مسواک برقی Sonic مدل PRO-850 از مجموعه محصولات برند B.Well سپاسگزاریم.

مسواک برقی Sonic مدل PRO-850 (که در ادامه به عنوان مسواک برقی، مسواک، محصول، وسیله نامیده می شود) برای تمیز کردن موثر و ملایم دندان ها، فضاهای بین دندان و ماساژ لثه طراحی شده است. فناوری حرکت نوسانی متعلق به برند Sonic به شما امکان می دهد سطح دندان را حتی در سخت ترین قسمت های قابل دسترسی تمیز کنید و موهای ریز DuPont با داشتن کیفیت بالا برای مینای دندان و لثه ها بی خطر است. پنج حالت عملیاتی به شما کمک می کند شدت ارتعاشی قسمت سر را تنظیم کنید و حالت مناسب برای مسواک زدن دندان های خود را پیدا نمایید. مسواک Sonic مدل PRO-850 برای قسمت های پر شده، پل دار، ایمپلنت دار، تاج دار و سیمی شده دندان ها بی خطر است.

۱. دستورالعمل های ایمنی

⚠ هشدار!

- این وسیله مجهز به باتری داخلی قابل شارژ لیتیوم-یون است. این وسیله را در آتش نیندازید، آن را گرم نکنید و از وسیله در مکان هایی با دمای هوای بالا استفاده و یا آن را در این دما رها سازی نکنید.
- فقط پرسنل مجاز مرکز خدمات می توانند باتری را تعویض کنند، پرسنل غیر مجاز، اجازه به باز کردن محصول را ندارند.

⚠ احتیاط!

به دلایل ایمنی، این وسیله نباید توسط کودکان زیر ۸ سال، افراد با توانایی های کم جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد دارای تجربه و دانش کم استفاده شود، مگر اینکه آنها تحت نظارت یا آموزش در مورد استفاده از این وسیله به روشی ایمن و درک خطرات مربوطه قرار گرفته باشند. کودکان نباید بدون نظارت بزرگسالان از این محصول استفاده کنند. این محصول و کابل آن را از دسترس کودکان زیر ۸ سال دور نگه دارید.

⚠ اقدامات احتیاطی:

- اولین بار که از مسواک Sonic استفاده می کنید، ممکن است در ناحیه دندان احساس تحریک یا سوزن سوزن شدن کنید و ممکن است به دلیل ارتعاش سریع موها، خونریزی یا ناراحتی در ناحیه لثه را تجربه کنید. حساسیت به خونریزی باید در عرض دو هفته از استفاده متوقف شود. اگر این اتفاق رخ نداد، از مسواک خود استفاده نکنید و با دندانپزشک خود تماس بگیرید.
- اگر در ۲ ماه گذشته جراحی دهان یا جراحی لثه انجام داده اید، پیش از استفاده از مسواک با دندانپزشک مشورت کنید.
- اگر هنگام استفاده از مسواک Sonic احساس ناراحتی یا درد کردید، استفاده از محصول را متوقف کنید یا با دندانپزشک خود مشورت کنید.
- مسواک را بیش از حد روی دندان ها و لثه های خود فشار ندهید.
- از این وسیله فقط برای هدف مورد نظر خود همانطور که در این راهنما توضیح داده شده است استفاده کنید.
- دسته محصول ممکن است هنگام شارژ کمی گرم شود، که این طبیعی است. اما اگر دسته مسواک بسیار داغ شد، بلافاصله محصول را جدا کرده و برای بازرسی به یک مرکز خدمات مجاز ببرید.
- این محصول فقط برای استفاده در مکان های سرپوشیده در نظر گرفته شده است. آن را از نور مستقیم خورشید دور نگه دارید و در دمای اتاق یا در مکانی خشک و تهویه شده نگهداری کنید.
- مسواک را برای مدت طولانی در آب یا سایر مایعات غوطه ور نکنید.
- کابل شارژر را از سطوح گرم دور نگه دارید.
- هرگز هیچ جسم خارجی را در درگاه شارژ محصول رها یا وارد نکنید.
- از سر برس یا موهای مجاله یا خم شده استفاده نکنید. سر برس را هر ۳ ماه یا بیشتر، اگر علائم فرسایش را نشان دهد، تعویض کنید.
- فقط از سر برس توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید.
- به منظور رعایت بهداشت شخصی، باید از یک سر برس جداگانه برای هر عضو خانواده استفاده شود. سر برس برای استفاده شخصی در نظر گرفته شده است.
- شارژر را با دستان مرطوب به برق وصل نکنید.
- فقط شارژر را با پارامترهای مورد نیاز مشخص شده در این دفترچه راهنما به یک منبع برق متصل کنید.
- شارژر را از آب دور نگه دارید.

۲. موارد استفاده

مسواک های برقی Sonic مدل PRO-850 برای از بین بردن پلاک و مواد غذایی از دندان ها طراحی شده اند تا خطر پوسیدگی دندان را کاهش دهند و سلامت دندان ها و سلامت دهان را بهبود بخشند.

۳. موارد عرضه شده



- ① دو کلاه محافظ بهداشتی
- ② دو عدد سر برس
- ③ دسته مسواک
- ④ کابل USB
- ⑤ کیسه ذخیره سازی ضد آب
- ⑥ دستورالعمل های عملیاتی
- ⑦ جعبه

سر مسواک جایگزین برای مسواک برقی Sonic مدل PRO-850 برای خریدن موجود است.
برای نتایج مطلوب، هر ۳ ماه یک بار سر مسواک را تعویض کنید.

۴. دستورالعمل های کاربری

گام اول: سر برس را به مسواک وصل کنید.
شکاف کوچکی بین سر برس و دسته وجود دارد، که طبیعی است. شکاف به سر برس اجازه می دهد تا به درستی لرزش کند.

گام دوم: سر مسواک را خیس کرده و مقدار مورد نظر خمیر دندان را روی موها بمالید.

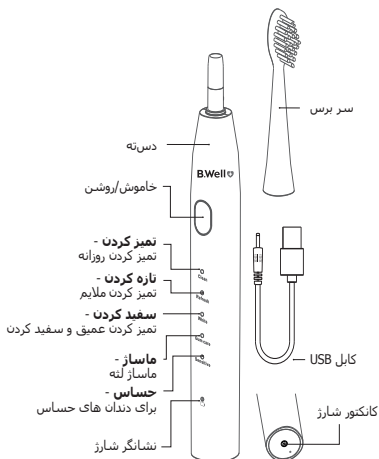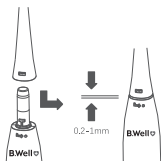

گام سوم: روشن/تغییر حالت/خاموش

- دکمه پاور را به آرامی فشار دهید تا مسواک روشن شود.
- تغییر حالت: پس از روشن شدن، به سرعت دکمه پاور را برای تغییر و انتخاب حالت مناسب فشار دهید.
- می توانید حالت مسواک زدن مناسب خود را انتخاب کنید:
- **تمیز کردن** — تمیز کردن روزانه
- حالت مسواک زدن استاندارد، مناسب برای استفاده روزانه.
- **تازه سازی** — تمیز کردن ملایم
- برای افرادی که خونریزی لثه دارند
- **سفید** — تمیز کردن عمیق و سفید کردن
- طراحی شده برای از بین بردن لکه ها از سطح دندان های شما.
- از این حالت برای حداکثر تمیز کردن و سفید کردن دندان های خود استفاده کنید.

- **مراقبت از لثه** — ماساژ لثه طراحی شده برای حذف جرم دندان. این حالت دارای اثر ماساژ بر روی لثه است.
- **حساس** — برای دندان‌های حساس برای افرادی که دندان و لثه حساس دارند. این حالت برای اولین بار استفاده از مسواک Sonic توصیه می‌شود.

خاموش کردن


- دکمه پاور را فشار دهید تا حالت تغییر کند، پس از آخرین حالت، دوباره دکمه پاور را فشار دهید تا مسواک خاموش شود.
- پس از روشن شدن، دکمه پاور را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا مسواک خاموش شود. حالت فعلی پیش از خاموش شدن، حالت پیش فرض است که محصول دوباره راه اندازی می‌شود.
- مسواک دارای تایمر داخلی ۲ دقیقه ای است و پس از ۲ دقیقه به طور خودکار خاموش می‌شود.

گام چهارم: جهت مسواک زدن.

- موهای مسواک را در مقابل خط لثه با زاویه کمی (۴۵ درجه) قرار دهید، به آرامی در حرکت دایره ای از خط لثه حرکت کنید، به آرامی فشار دهید تا موها به ناحیه بین خط لثه و دندان ها برسد.
- دندان های خود را با یک حرکت کوچک به جلو و عقب مسواک بزنید تا موها به ناحیه بین دندان ها برسد، این حرکت را در طول چرخه مسواک زدن خود ادامه دهید.
- مسواک زدن را از ناحیه ۱ شروع کنید، سپس همانطور که در تصویر نشان داده شده است به ناحیه بعدی بروید. هر ناحیه باید به مدت ۳۰ ثانیه مسواک زده شود، تایمر داخلی ارتعاش می‌کند تا نشان دهد که شما باید به بعدی بروید.



- ۲ دقیقه بهترین زمان برای مسواک زدن با توجه به توصیه های دندانپزشکان است. پس از دو دقیقه مسواک زدن، مسواک به طور خودکار خاموش می‌شود، اگر نیاز به مسواک زدن طولانی تر دارید، برای ادامه استفاده آن روشن کنید.

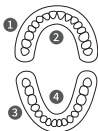


گام پنجم: تمیز کردن سر برس

- پس از هر بار استفاده سر برس را بشویید و خشک کنید.
- پس از تمیز کردن سر برس، مسواک را در ناحیه خشک و خنک قرار دهید.

شارژ کردن

- پس از شارژ کامل، مسواک برقی به گونه ای طراحی شده است که ۶۰ روز زمان سرویس را فراهم می‌کند (هر بار ۲ دقیقه، دو بار در روز) هنگامی که شارژ باتری کم است، نشانگر سبز در پایین محصول شروع به فلاش می‌کند، لطفا محصول خود را به موقع شارژ کنید.
- برای شارژ، USB را به مسواک وصل کرده و به منبع برق وصل کنید، نشانگر شارژ روشن می‌شود. محصول در حین شارژ فلش می‌زند. هنگامی که باتری به طور کامل شارژ می‌شود، نشانگر شارژ بدون چشمک زدن سبز می‌شود.
- اگر مدت زیادی از محصول استفاده نکرده اید، ممکن است هنگام اتصال به شارژر، نشانگر شارژ در ۶ تا ۱۰ دقیقه اول روشن نشود.

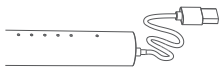

۸. اطلاعات گارانتی

مدت ضمانت ۲ سال پس از تاریخ خرید است.

این ضمانت نامه هیچ گونه خسارت ناشی از استفاده ناصحیح را شامل نمی شود.

چنانچه در طول مدت اعتبار ضمانت نامه، عیبی در ساخت دستگاه مشاهده شد، قطعه معیوب تعمیر می شود یا اگر تعمیر دستگاه غیرممکن باشد، با دستگاهی دیگر تعویض خواهد شد.

ضمانت نامه این موارد را شامل نمی شود: اجزاء، وسایل مصرفی مستعد فرسودگی، باتری ها، کیسه ها، بسته بندی.

عمر مفید محصول ممکن است به محیطی که در آن استفاده می شود بستگی داشته باشد. عمر مفید مورد انتظار مسواک ۲ سال است اگر ۲ بار در روز به مدت ۲ دقیقه استفاده شود.

۹. شرح نمادهای روی بسته بندی و برچسب

نشان CE		شرایط عملیاتی، دما ۰ الی ۴۰ درجه سانتی گراد	
قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل ها را بخوانید		شرایط ذخیره سازی، دما ۲۰- الی ۷۰ درجه سانتی گراد	
درجه حفاظت محفظه در برابر ورود آلودگی ها فقط برای استفاده در مکان های سرپوشیده	IPX7	شماره محصول	
دستگاه کلاس III		شماره سری ساخت	
شرکت سازنده		شماره سریال	
		دفع پسماند به منظور جمع آوری تفکیک شده	


تاریخ تولید دستگاه روی برچسب آن در شماره سریال (SN) ب صورت رمز نوشته شده است: دو رقم اول نشا ندهنده هفته ساخت و دو رقم دوم نشا ندهنده سال ساخت م یباشد.

آخرین بازبینی 2023-W42



رازان طب آپادانا

نماینده رسمی و انحصاری محصولات
در ایران B.Well Swiss AG

 **B.Well Swiss AG**
Bahnhofstrasse 24,
9443 Widnau, Switzerland
www.bwell-swiss.ch